


Boletín técnico		
	TÍTULO: Actualizaciones de las instrucciones de uso de HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00044_ES-ES	Revisión: A	PÁGINA: 1 de 2

Distribución: Sitio web de Vapotherm, servicio de atención al cliente, soporte técnico y equipo de ventas (global)

Asunto: Este boletín sirve de actualización de las Instrucciones de uso de HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consulte las Instrucciones de uso mencionadas anteriormente para obtener instrucciones completas, así como todas las advertencias y precauciones.

Fecha: agosto de 2022

Sustituya el texto existente por la siguiente información o añádala en las secciones según se indica:

Proceso de configuración inicial del dispositivo HVT 2.0

Paso 5: Configuración de preferencias del dispositivo

Sustituya la *figura 7: Configuración de preferencias del dispositivo* por la siguiente información:



<p>Paso 5: Configuración de preferencias del dispositivo</p> <p>Configure las preferencias del dispositivo.</p>	
--	--

Figura 7: Configuración de preferencias del dispositivo

Selección del tipo de interfaz del paciente

6. Deje que el DPC se cebe con agua antes de iniciar el tratamiento. El dispositivo indicará cuando el cebado se haya completado. El suministro de agua puede tardar hasta 5 minutos en cebar el DPC, incluidas las bolsas y botellas de agua flexibles, rígidas o semirrígidas.

Boletín técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Actualizaciones de las instrucciones de uso de HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00044_ES-ES	Revisión: A	PÁGINA: 2 de 2

Selección de los parámetros de tratamiento

Sustituya la nota y figura 31: Pantalla del temporizador de FiO₂ 100 % por lo siguiente:

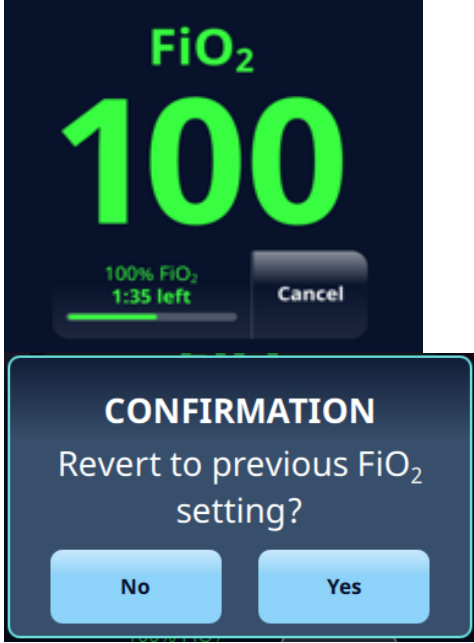
<p>Al pulsar el botón [FiO₂ 100 %] y confirmar, se administra FiO₂ al 100 % durante 2 minutos y aparece un temporizador en la pantalla.</p> <p>Cuando transcurren los 2 minutos, la configuración de FiO₂ recupera el ajuste inicial.</p> <p>! NOTA: Para detener la administración de FiO₂ al 100 % antes de que transcurran los 2 minutos y se recupere el ajuste anterior de FiO₂, toque el botón [Cancelar] y <CONFIRMAR> tocando [Sí]. Para seguir administrando FiO₂ al 100 %, toque [No].</p>	
---	---

Figura 31: Se muestra el temporizador de FiO₂ 100 %

Cómo transferir a un paciente

Añada la siguiente nota al paso 5:

! NOTA: Al conectarse a la alimentación de CA, la carga de la batería de transferencia puede ralentizarse o pausarse si se utiliza el dispositivo fuera del rango de temperatura de 20–25 grados Celsius.

Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, contacte con el soporte técnico de Vapotherm en ts@vtherm.com o con su representante local de Vapotherm.