


<b>Boletín técnico</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TÍTULO: Actualizaciones de las Instrucciones de uso del HVT 2.0</b>	
Nº DOC: TECH-00044_ES-MX	Revisión: A	PÁGINA: 1 de 2

**Distribución:** Sitio web de Vapotherm, servicio al cliente, servicio técnico y equipo de ventas (global)

**Asunto:** Este Boletín sirve como una actualización de las Instrucciones de uso del HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consulte las Instrucciones de uso mencionadas anteriormente para obtener instrucciones completas y todas las advertencias y precauciones.

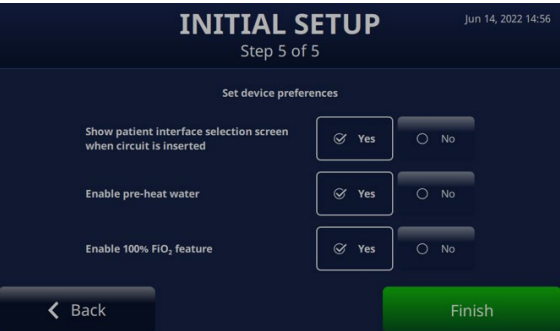
**Fecha:** agosto de 2022

Reemplace y/o agregue la siguiente información a las secciones como se indica:

## Proceso de configuración inicial del dispositivo HVT 2.0


### Paso 5: ajustar las preferencias del dispositivo

Reemplace la *Figura 7: Configuración de las preferencias del dispositivo* con lo siguiente:

<p><b>Paso 5: ajustar las preferencias del dispositivo</b></p> <p>Ajuste las preferencias del dispositivo.</p>	 <p><i>Figura 7: Configuración de las preferencias del dispositivo</i></p>
--	--

## Seleccione el tipo de accesorio del paciente

6. Deje que el DPC se ceba con agua antes de iniciar la terapia. El dispositivo indicará cuando se haya completado el cebado. El suministro de agua puede tardar hasta 5 minutos en cebar el DPC, incluidas las bolsas y botellas de agua flexibles, rígidas o semirrígidas.

<b>Boletín técnico</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TÍTULO: Actualizaciones de las Instrucciones de uso del HVT 2.0</b>	
Nº DOC: TECH-00044_ES-XL	Revisión: A	PÁGINA: 2 de 2

## Seleccione los parámetros de la terapia

¡Reemplazar! Nota y *Figura 31: Pantalla del temporizador de FiO<sub>2</sub> al 100 % con lo siguiente:*

<p>Cuando el botón <b>[100% FiO<sub>2</sub>]</b> se presiona y se confirma, se administra FiO<sub>2</sub> al 100 % durante 2 minutos y aparece un temporizador en la pantalla.</p> <p>Una vez transcurridos los 2 minutos, el ajuste de FiO<sub>2</sub> vuelve a la configuración inicial.</p> <p><b>! NOTA:</b> para dejar de administrar FiO<sub>2</sub> al 100 % antes de que transcurran los 2 minutos y vuelva a la configuración anterior de FiO<sub>2</sub>, toque el botón <b>[Cancelar]</b> y el botón <b>&lt;CONFIRMAR&gt;</b> tocando <b>[Sí]</b>. Para continuar administrando FiO<sub>2</sub> al 100 %, toque <b>[No]</b>.</p>	 <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>Figura 31: se muestra el temporizador del FiO<sub>2</sub> al 100 %</i></p>
---	--

## Cómo trasladar a un paciente

Agregue la siguiente Nota al paso 5:

**! NOTA:** cuando se conecta a la alimentación de CA, la carga de la batería de transferencia puede ralentizarse o pausarse si se utiliza el dispositivo fuera del rango de temperatura de 20 a 25 grados centígrados.

Si tiene alguna pregunta sobre este cambio, comuníquese con el servicio técnico de Vapotherm enviando un correo a [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) o a su representante de Vapotherm local.