

Bulletin technique		
 VAPOTHERM	TITRE : Mises à jour du mode d'emploi du HVT 2.0	
N° de DOC. : TECH-00044_FR-FR	Révision : A	PAGE : 1 sur 2

Distribution : site Web de Vapotherm, service client, assistance technique et équipe de vente (internationale)

Objet : Ce bulletin sert de mise à jour de votre mode d'emploi du HVT 2.0 :

- 43000657 Rév. A (DE)
- 43000671 Rév. A (GB)
- 43000656 Rév. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consultez le mode d'emploi mentionné ci-dessus pour des instructions complètes ainsi que tous les avertissements et précautions.

Date : août 2022

Veillez remplacer et/ou ajouter les informations suivantes aux sections comme indiqué :

Processus de configuration initiale de l'appareil HVT 2.0

Étape 5 : configuration des préférences de l'appareil

Remplacer *Figure 7 : paramètres des préférences de l'appareil* par ce qui suit :

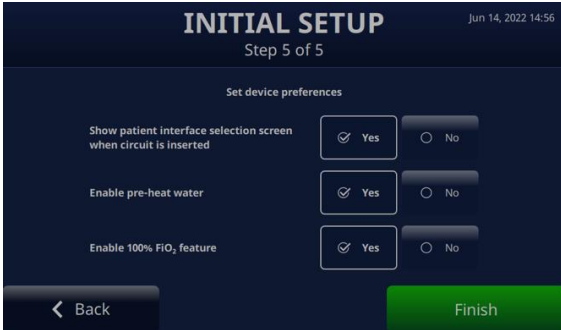
<p>Étape 5 : configuration des préférences de l'appareil</p> <p>Configurez les préférences de l'appareil.</p>	
--	--

Figure 7 : réglages des préférences de l'appareil

Sélectionner le type d'interface patient

6. Laissez le DPC se préparer avec de l'eau avant de commencer le traitement. L'appareil indique lorsque la préparation est terminée. L'alimentation en eau peut mettre jusqu'à 5 minutes pour amorcer le DPC, y compris les poches d'eau souples, rigides ou semi-rigides, et les bouteilles d'eau.

Bulletin technique		
 VAPOTHERM	TITRE : Mises à jour du mode d'emploi du HVT 2.0	
N° de DOC. : TECH-00044_FR-FR	Révision : A	PAGE : 2 sur 2

Sélectionner les paramètres de la thérapie

À remplacer ! Remarque et *Figure 31* : affichage de la minuterie de FiO₂ à 100 % avec les éléments suivants :

Quand on appuie sur le bouton **[FiO₂ 100 %]** et que l'on confirme, la FiO₂ est administrée à 100 % pendant 2 minutes et une minuterie s'affiche à l'écran.

Au bout des 2 minutes, le réglage de la FiO₂ revient à celui de départ.

! REMARQUE : pour arrêter d'administrer la FiO₂ à 100 % avant l'expiration des 2 minutes et revenir au réglage de FiO₂ précédent, appuyez sur le bouton **[Annuler]** et pour **<CONFIRMER>**, appuyez sur **[Oui]**. Pour continuer à administrer la FiO₂ à 100 %, appuyez sur **[Non]**.



The image shows two screens from a medical device. The top screen displays 'FiO₂ 100' in large green numbers on a dark background. Below this, a progress bar shows '100% FiO₂ 1:35 left' and a 'Cancel' button. The bottom screen is a confirmation dialog box with the text 'CONFIRMATION Revert to previous FiO₂ setting?' and two buttons: 'No' and 'Yes'.

Figure 31 : affichages de la minuterie de FiO₂ à 100 %

Comment transférer un patient

Ajoutez la !Remarque suivante à l'étape 5 :

! REMARQUE : lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation secteur, la charge de la batterie de transfert peut être ralentie ou interrompue si l'appareil est utilisé en dehors de la plage de température de 20 à 25 degrés Celsius.

Si vous avez des questions concernant ce changement, veuillez contacter l'assistance technique de Vapotherm à l'adresse ts@vtherm.com ou votre représentant Vapotherm local.