


Buletin Teknis		
	JUDUL: Pembaruan Petunjuk Penggunaan HVT 2.0	
DOC #: TECH-00044_ID-ID	Revisi: A	HALAMAN: 1 dari 2

Distribusi: Situs web Vapotherm, Layanan Pelanggan, Dukungan Teknis, dan Tim Penjualan (Global)

Subjek: Buletin ini berfungsi sebagai pembaruan untuk Petunjuk Penggunaan HVT 2.0 Anda:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Lihat referensi Petunjuk Penggunaan yang tercantum di atas untuk petunjuk lengkap serta semua peringatan dan tindakan pencegahan.

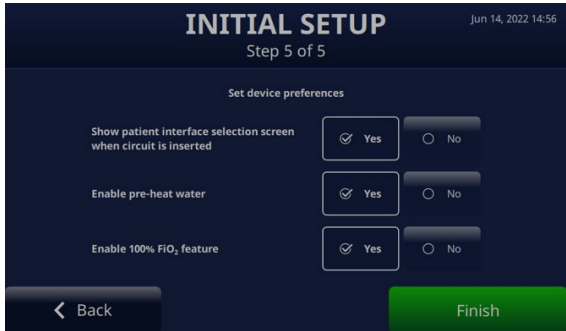
Tanggal: Agustus 2022

Harap ganti dan/atau tambahkan informasi berikut ke bagian seperti yang ditunjukkan:

Proses Konfigurasi Awal Perangkat HVT 2.0


Langkah 5: Konfigurasi preferensi Perangkat

Ganti *Gambar 7: Pengaturan preferensi perangkat* dengan yang berikut ini:

<p>Langkah 5: Konfigurasi preferensi Perangkat</p> <p>Atur preferensi perangkat.</p>	 <p><i>Gambar 7: Pengaturan preferensi perangkat</i></p>
---	--

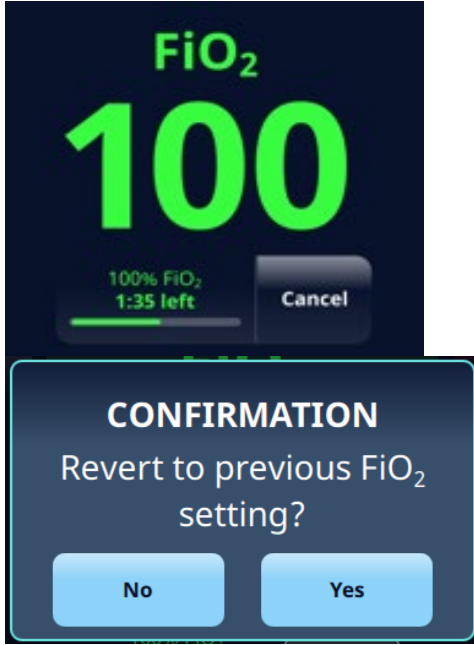
Pilih Tipe Antarmuka Pasien

6. Biarkan DPC melakukan prime dengan air sebelum memulai terapi. Perangkat akan menunjukkan saat prime selesai. Mungkin diperlukan waktu hingga 5 menit agar suplai air di-priming ke DPC, termasuk kantong dan botol air yang fleksibel, kaku, atau semi-kaku.

Buletin Teknis		
 VAPOTHERM	JUDUL: Pembaruan Petunjuk Penggunaan HVT 2.0	
DOC #: TECH-00044_ID-ID	Revisi: A	HALAMAN: 2 dari 2

Pilih Parameter Terapi

Ganti! Catatan dan Gambar 31: Tampilan timer 100% FiO₂ dengan tampilan berikut ini:

<p>Ketika tombol [100% FiO₂] ditekan dan dikonfirmasi, FiO₂ diberikan pada tingkat 100% selama 2 menit dan timer ditampilkan di layar.</p> <p>Ketika 2 menit berakhir, pengaturan FiO₂ kembali ke pengaturan awal.</p> <p>! CATATAN: Untuk berhenti memberikan 100% FiO₂ sebelum 2 menit berakhir dan kembali ke pengaturan FiO₂ sebelumnya, ketuk tombol [Cancel] (Batal) dan <CONFIRM> (KONFIRMASI) dengan mengetuk [Yes] (Ya). Untuk melanjutkan pemberian 100% FiO₂, Ketuk [No] (Tidak).</p>	
---	---

Gambar 31: tampilan timer 100% FiO₂

Cara Memindahkan Pasien

Tambahkan !Catatan berikut untuk langkah 5:

! CATATAN: Saat terhubung ke daya AC, pengisian daya baterai transfer mungkin melambat atau dijeda sementara jika mengoperasikan perangkat di luar rentang suhu 20 – 25 derajat Celcius.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perubahan ini, silakan hubungi Dukungan Teknis Vapotherm di ts@vtherm.com atau perwakilan Vapotherm terdekat.