


Bollettino tecnico		
 VAPOTHERM	TITOLO: Aggiornamenti di HVT 2.0 Istruzioni per l'uso	
N. DOC: TECH-00044_IT-IT	Revisione: A	PAGINA: 1 di 2

Distribuzione: Sito Web, Servizio clienti, Supporto tecnico e Team di vendita (globale) di Vapotherm

Oggetto: Questo bollettino funge da aggiornamento del manuale HVT 2.0 Istruzioni per l'uso:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consultare le Istruzioni per l'uso di riferimento sopra elencate per le istruzioni complete e tutte le avvertenze e precauzioni.

Data: agosto 2022

Sostituire e/o aggiungere le seguenti informazioni alle sezioni come indicato:

Processo di configurazione iniziale del dispositivo HVT 2.0

Fase 5: impostare le preferenze del dispositivo

Sostituire *Figura 7: Impostazioni delle preferenze del dispositivo* con quanto segue:



<p>Fase 5: impostare le preferenze del dispositivo</p> <p>Impostare le preferenze del dispositivo.</p>	
---	--

Figura 7: Impostazioni delle preferenze del dispositivo

Selezionare il tipo di interfaccia paziente

6. Consentire al DPC di adescare con acqua prima di iniziare la terapia. Il dispositivo indicherà quando l'adescamento è completo. Potrebbero essere necessari fino a 5 minuti prima che la riserva d'acqua adeschi il DPC, comprese le sacche e i flaconi d'acqua flessibili, rigidi o semirigidi.

Bollettino tecnico		
 VAPOTHERM	TITOLO: Aggiornamenti di HVT 2.0 Istruzioni per l'uso	
N. DOC: TECH-00044_IT-IT	Revisione: A	PAGINA: 2 di 2

Selezionare i parametri di terapia

Sostituire ! Nota e Figura 31: Viene visualizzato il timer 100% FiO₂ con quanto segue:

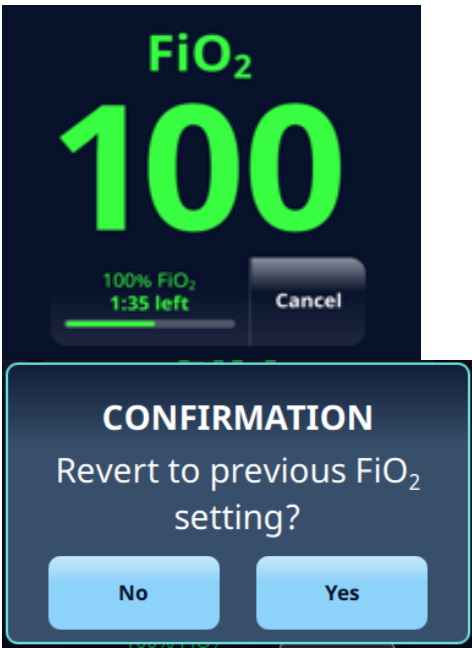
<p>Quando il pulsante [100% FiO₂] viene premuto e confermato, la FiO₂ viene somministrata al 100% per 2 minuti e sullo schermo viene visualizzato un timer.</p> <p>Allo scadere dei 2 minuti, la FiO₂ torna all'impostazione iniziale.</p> <p>! NOTA: per interrompere la somministrazione di FiO₂ al 100% prima che scadano i 2 minuti e tornare all'impostazione di FiO₂ precedente, toccare il pulsante [Annulla] e <CONFERMARE> toccando [Sì]. Per continuare la somministrazione di FiO₂ al 100%, toccare [No].</p>	
--	---

Figura 31: Viene visualizzato il timer 100% FiO₂

Come trasferire un paziente

Aggiungere la seguente ! Nota alla fase 5:

! NOTA: quando il dispositivo viene collegato all'alimentazione CA, la carica della batteria di trasferimento potrebbe essere rallentata o interrotta se si utilizza il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura compreso tra 20 e 25 gradi Celsius.

In caso di domande su questa modifica, contattare il Supporto tecnico Vapotherm all'indirizzo ts@vtherm.com o il rappresentante Vapotherm locale.