


Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de Uso do HVT 2.0	
Nº DO DOC.: TECH-00044_PT-BR	Revisão: A	PÁGINA: 1 de 2

Distribuição: Site da Vapotherm, Atendimento ao cliente, Suporte técnico e Equipe de vendas (global)

Assunto: Este Boletim é uma atualização das Instruções de Uso do HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consulte as Instruções de Uso mencionadas acima para ver instruções completas e todos os avisos e precauções.

Data: agosto de 2022

Substitua e/ou adicione as seguintes informações às seções conforme indicado:

Processo de configuração inicial do dispositivo HVT 2.0

Etapa 5: Configuração das preferências do dispositivo

Substitua a *Figura 7: Configurações de preferências do dispositivo* pelo seguinte:

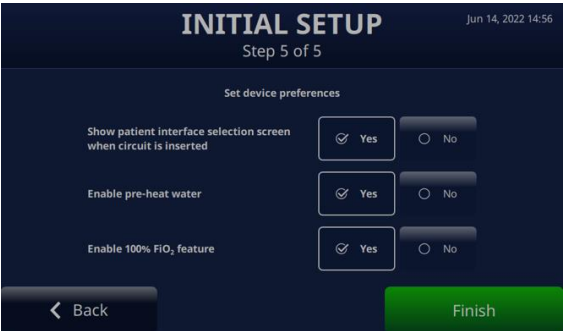

<p>Etapa 5: Configuração das preferências do dispositivo</p> <p>Configuração das preferências do dispositivo.</p>	
--	--

Figura 7: Configuração das preferências do dispositivo

Selecione o tipo de interface do paciente

6. Deixe o DPC ser preenchido com água antes de iniciar a terapia. O dispositivo indicará quando a preparação estiver concluída. Pode levar até 5 minutos para o suprimento de água preencher o DPC com água. Isso inclui a preparação dos sacos e frascos de água flexíveis, rígidos ou semirrígidos.

Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de Uso do HVT 2.0	
Nº DO DOC.: TECH-00044_PT-BR	Revisão: A	PÁGINA: 2 de 2

Selecionar parâmetros de terapia

Substitua! Observação e *Figura 31: Tela do temporizador para 100% FiO₂ com o seguinte:*

<p>Ao pressionar e confirmar o botão [100% FiO₂], o FiO₂ é administrado a 100% por 2 minutos e um temporizador aparece na tela.</p> <p>Quando os 2 minutos expirarem, a configuração da FiO₂ retornará à configuração inicial.</p> <p>! OBSERVAÇÃO: Para parar a administração de 100% FiO₂ antes de os 2 minutos expirem e retornar à configuração anterior de FiO₂, toque no botão [Cancelar] e <CONFIRMAR> tocando em [Sim]. Para continuar administrando 100% de FiO₂, toque em [Não].</p>	 <p><i>Figura 31: Tela do temporizador para 100% FiO₂</i></p>
--	---

Como transferir um paciente

Adicione a seguinte !Observação à etapa 5:

! OBSERVAÇÃO: quando conectado à alimentação CA, o carregamento da bateria de transferência pode ser desacelerado ou pausado se o dispositivo for operado fora da faixa de temperatura de 20 a 25 graus Celsius.

Se você tiver alguma dúvida sobre essa alteração, fale com o Suporte técnico da Vapotherm em ts@vtherm.com ou com seu representante local da Vapotherm.