


Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de utilização do HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00044_PT-PT	Revisão: A	PÁGINA: 1 de 2

Distribuição: Site da Vapotherm, Apoio ao Cliente, Suporte Técnico e Equipa de Vendas (global)

Assunto: Este boletim serve como uma atualização às suas Instruções de utilização do HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Consulte as Instruções de utilização listadas acima para obter instruções completas, bem como todas as advertências e precauções.

Data: agosto de 2022

Substitua e/ou adicione as seguintes informações às secções conforme indicado:

Processo de configuração inicial do dispositivo HVT 2.0

Passo 5: Configurar as preferências do dispositivo

Substitua a *Figura 7: Definições de preferências do dispositivo* pelas seguintes informações:

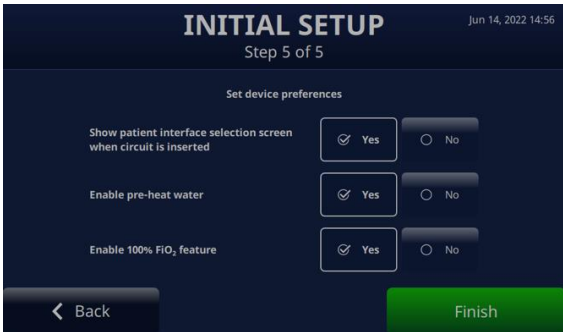

<p>Passo 5: Configurar as preferências do dispositivo</p> <p>Configure as preferências do dispositivo.</p>	
---	--

Figura 7: Definições das preferências do dispositivo

Selecionar o tipo de interface do doente

6. Permita que o DPC seja preparado com água antes de iniciar a terapia. O dispositivo indicará quando a preparação estiver concluída. Pode demorar até 5 minutos para o fornecimento de água preparar o DPC, incluindo sacos e garrafas de água flexíveis, rígidas ou semirrígidas.

Boletim técnico		
 VAPOTHERM	TÍTULO: Atualizações das Instruções de utilização do HVT 2.0	
N.º de DOC: TECH-00044_PT-PT	Revisão: A	PÁGINA: 2 de 2

Selecionar os parâmetros da terapia

Substitua a nota e a "Figura 31: Ecrã do temporizador de FiO₂ a 100 %" pelo seguinte:

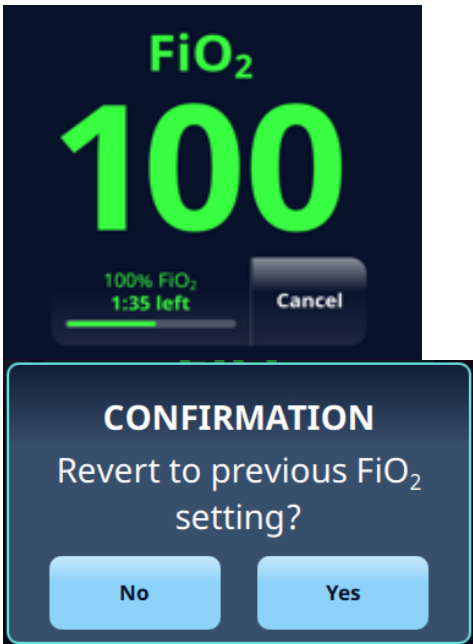
<p>Quando o botão [FiO₂ a 100 %] é premido e confirmado, a FiO₂ é administrada a 100 % durante 2 minutos e é apresentado um temporizador no ecrã.</p> <p>Decorridos os 2 minutos, a definição de FiO₂ volta à definição inicial.</p> <p>! NOTA: para parar de administrar FiO₂ a 100 % antes de que decorram os 2 minutos e reverter para definição anterior de FiO₂, toque no botão [Cancelar] e <CONFIRMAR> tocando em [Sim]. Para continuar a administrar FiO₂ a 100 %, toque em [Não].</p>	
--	---

Figura 31: É apresentado o temporizador de FiO₂ a 100 %

Como transferir um doente

Adicione a nota seguinte ao passo 5:

! NOTA: ao ligar-se à alimentação de CA, a carga da bateria de transferência pode ser abrandada ou parada se utilizar o dispositivo fora do intervalo de temperatura de 20–25 graus Celsius.

Se tiver alguma questão sobre esta alteração, contacte o Apoio Técnico da Vapotherm em ts@vtherm.com ou o seu representante local da Vapotherm.