


<b>Teknisk bulletin</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITEL: Uppdateringar av bruksanvisningen till HVT 2.0</b>	
DOC-nr: TECH-00044_SV-SE	Revision: A	SIDA: 1 av 2

**Distribution:** Vapotherms webbplats, kundtjänst, teknisk support och säljteam (globalt)

**Ämne:** Denna bulletin fungerar som en uppdatering av bruksanvisningen till HVT 2.0:

- 43000657 Rev. A (DE)
- 43000671 Rev. A (GB)
- 43000656 Rev. A (FR, IT, PT-BR, NL-BE, SV-SE, PT-PT, TR, ES-XL, ES, ID, JP)

Se den bruksanvisning som nämns ovan för fullständiga anvisningar och samtliga varningar och försiktighetsåtgärder.

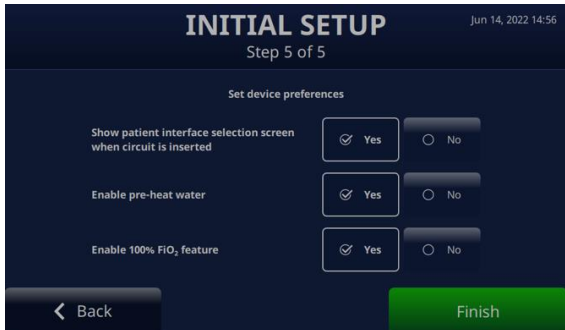
**Datum:** augusti 2022

Ersätt och/eller lägg till följande information i de avsnitt som anges:

## Process för inledande enhetsinstallation – HVT 2.0


### Steg 5: Konfiguration av enhetens användarinställningar

Ersätt *figur 7: Konfiguration av användarinställningar* med följande:

<p><b>Steg 5: Konfiguration av enhetens användarinställningar</b></p> <p>Konfigurera enhetens användarinställningar.</p>	 <p><i>Figur 7: Konfiguration av användarinställningar</i></p>
--	--

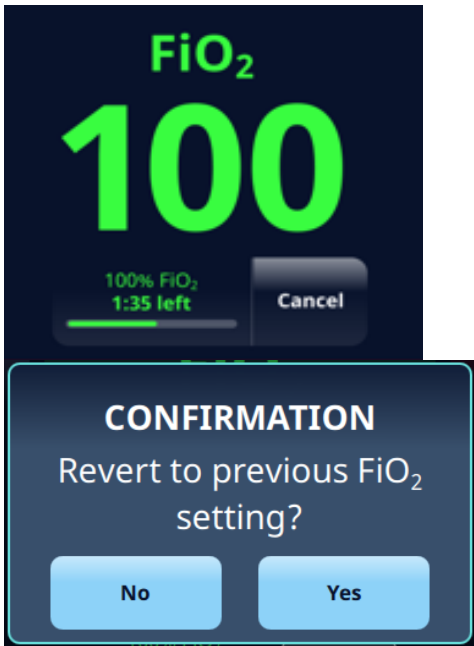
## Välja typ av patientgränssnitt

6. Vänta tills DPC:n fylls med vatten innan behandlingen påbörjas. Enheten anger när primningen är klar. Det kan ta upp till 5 minuter för vattentillförseln att prima DPC:n, inklusive flexibla, styva eller halvstyva vattenpåsar och flaskor.

<b>Teknisk bulletin</b>		
 <b>VAPOTHERM</b>	<b>TITEL: Uppdateringar av bruksanvisningen till HVT 2.0</b>	
DOC-nr: TECH-00044_SV-SE	Revision: A	SIDA: 2 av 2

## Välja behandlingsparametrar

Ersätt ! Obs och figur 31: Timer för 100 % FiO<sub>2</sub> visas med följande:

<p>När man trycker på knappen <b>[100 % FiO<sub>2</sub>]</b> och bekräftar, administreras FiO<sub>2</sub> till 100 % i 2 minuter och en timer visas på skärmen.</p> <p>När de 2 minuterna har gått återgår FiO<sub>2</sub>-inställningen till den ursprungliga inställningen.</p> <p><b>!OBS:</b> Om du vill sluta administrera 100 % FiO<sub>2</sub> innan 2 minuter har gått och återgå till föregående FiO<sub>2</sub>-inställning trycker du på <b>[Avbryt]</b>-knappen och <b>&lt;BEKRÄFTA&gt;</b> genom att trycka på <b>[Ja]</b>. Om du vill fortsätta administrera 100 % FiO<sub>2</sub> trycker du på <b>[Nej]</b>.</p>	
<p><i>Figur 31: Timer för 100 % FiO<sub>2</sub> visas</i></p>	

## Hur man förflyttar en patient

Lägg till följande ! Obs till steg 5:

**! OBS:** När förflyttningsbatteriet är anslutet till växelström kan laddningen av det sakta ner eller pausas om enheten används utanför temperaturintervallet 20–25 °C.

Om du har några frågor om den här ändringen kan du kontakta Vapotherms tekniska support på [ts@vtherm.com](mailto:ts@vtherm.com) eller din lokala Vapotherm-representant.